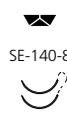


Sof silk™ Плетеный нерассасывающийся покрытый шелк.

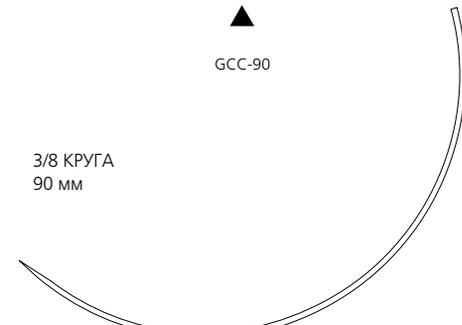
Описание материала:	Шовный материал Sof silk™ представляет собой нерассасывающийся, стерильный, немутагенный, хирургический шовный материал, состоящий из натуральных белковых шелковых волокон – фиброин. Этот белок получают от одомашненных гусениц тутового шелкопряда <i>Bombyx mori</i> семейства <i>Bombycidae</i> . Для получения хирургического шовного материала Sof silk™ шелковые волокна обрабатываются для удаления серициновой смазки, отбеливаются, сплетаются. Плетеные нити равномерно покрываются силиконом или особой восковой рецептурой для снижения капиллярности и увеличения смачиваемости, обеспечивающей оптимальные манипуляционные свойства, плавное прохождение через ткани опускание узла.
Характеристика материала:	Производственный процесс от плетения до покрытия обеспечивает шовный материал превосходной мягкостью и манипуляционными свойствами. Особый процесс покрытия дает гладкое прохождение через ткани, при оптимальной надежности узла.
Показания:	Шовный материал Sof silk™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования, применения в общей, торакальной, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии, ортопедии и нейрохирургии.
Действие:	Шовный материал Sof silk™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
Прочность:	Шовный материал Sof silk™ является нерассасывающимся. Деградация протеиновых волокон шелка <i>in vivo</i> может приводить к частичной потере прочности шовного материала со временем.
Стерилизация:	Гамма облучение.
Упаковка:	Шовный материал Sof silk™ выпускается белым или окрашенным в черный цвет экстрактом кампшевого дерева, и покрыт или силиконом, или специальной восковой рецептурой, размерами от 2 (метрический размер 5) до 8-0 (метрический размер 0.4). Стерильный шовный материал Sof silk™ поставляется с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12,24 или 36 шт.

Sofsilik™ Плетеный нерассасывающийся покрытый шелк.

Премиум шпатель / Premium Spatula							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 КРУГА 6 мм Кривизна 135° Длина иглы 4.80 мм Радиус 2.60 мм Микрон 200	8-0	0.4	45	Черный	12	SURGALLOY™ Покрытие силиконом	S-1734-K



Режущая / Conventional Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 КРУГА 90 мм GСС-90	2-0	3	100	Черный	36	Покрытие воском	CS-791
	0	3.5	100	Черный	36	Покрытие воском	CS-792
	1	4	100	Черный	36	Покрытие воском	CS-793



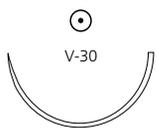
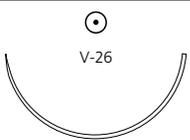
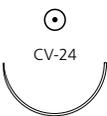
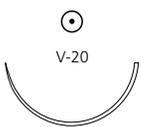
Премиум обратно режущая / Premium Point Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 КРУГА 13 мм Кривизна 130° Длина иглы 10.37 мм Радиус 5.72 мм	4-0	1.5	45	Черный	12	Покрытие воском	S-1789-K

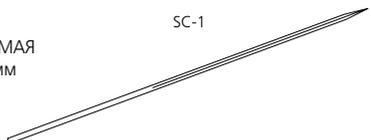
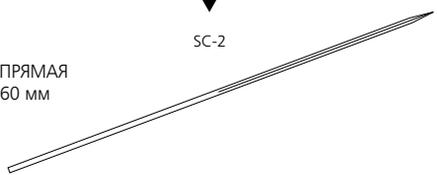
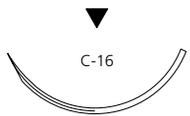


Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 КРУГА 11 мм	6-0	0.7	45	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие силиконом	SS-5639
3/8 КРУГА 13 мм	5-0	1	45	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие воском	SS-5640

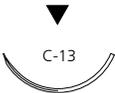



Sofsilik™ Плетеный нерассасывающийся покрытый шелк.

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 КРУГА 9 мм 	7-0	0.5	45	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие силиконом	VS-809
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	75	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие силиконом	VS-889
	5-0	1	75	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие воском	VS-890
1/2 КРУГА 30 мм 	3-0	2	75	Черный	36	Покрытие воском	GS-822
	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском	GS-823
	0	3.5	75	Черный	36	Покрытие воском	GS-824
1/2 КРУГА 37 мм 	0	3.5	75	Черный	36	Покрытие воском	VS-844
	1	4	75	Черный	36	Покрытие воском	VS-845
	2	5	75	Черный	36	Покрытие воском	VS-846
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском	CS-423
	0	3.5	75	Черный	36	Покрытие воском	CS-424
1/2 КРУГА 40 мм 	2	5	75	Черный	36	Покрытие воском	CS-575
3/8 КРУГА 17 мм 	4-0	1.5	75	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие воском	VS-881
	3-0	2	75	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие воском	VS-882
1/2 КРУГА 17 мм 	4-0	1.5	75	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие воском	VS-871
	3-0	2	75	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие воском	VS-872
1/2 КРУГА 20 мм 	4-0	1.5	75	Черный	36	Покрытие воском	GS-451
	3-0	2	75	Черный	36	Покрытие воском	GS-452
	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском	GS-453
1/2 КРУГА 26 мм 	3-0	2	75	Черный	36	Покрытие воском	GS-832
	2-0	3	5x45	Черный	24	Покрытие воском D-TACH™	GS-62-M
	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском	GS-833
	0	3.5	75	Черный	36	Покрытие воском	GS-834

Обратно режущая / Revers Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Покрытие	Код для заказа
1/2 КРУГА 26 мм 	2-0	3	45	Черный	36	Покрытие воском	CS-390
ПРЯМАЯ 51 мм 	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-523
ПРЯМАЯ 60 мм 	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-623
	2-0	3	100	Черный	36	Покрытие воском	SS-723
	0	3.5	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-624
3/8 КРУГА 30 мм 	3-0	2	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-675
	2-0	3	45	Черный	36	Покрытие воском	SS-677
	2-0	3	45	Черный	12	Покрытие воском	SS-677-G
	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-679
	0	3.5	45	Черный	36	Покрытие воском	SS-678
	0	3.5	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-680
	1	4	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-689
3/8 КРУГА 39 мм 	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-648
	0	3.5	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-647
	1	4	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-646
	2	5	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-651
1/2 КРУГА 24 мм 	3-0	2	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-632
	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-633
3/8 КРУГА 16 мм 	6-0	0.7	45	Черный	36	Покрытие силиконом	SS-681
	5-0	1	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-673
	4-0	1.5	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-645
	3-0	2	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-745
	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-746

Sofsilk™ Плетеный нерассасывающийся покрытый шелк.

Обратно режущая / Revers Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Покрытие воском	Код для заказа
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Черный	36	Покрытие воском	SS-682
	5-0	1	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-652
	4-0	1.5	45	Черный	36	Покрытие воском	SS-683
	4-0	1.5	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-653
	3-0	2	45	Черный	36	Покрытие воском	SS-694
	3-0	2	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-654
	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-655
	0	3.5	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-656
3/8 КРУГА 24 мм 	4-0	1.5	45	Черный	36	Покрытие воском	SS-629
	3-0	2	45	Черный	36	Покрытие воском	SS-684
	3-0	2	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-784
	2-0	3	45	Черный	36	Покрытие воском	SS-695
	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-785
	0	3.5	75	Черный	36	Покрытие воском	SS-786
3/8 КРУГА 12 мм 	5-0	1	45	Черный	36	Покрытие воском	S-1173
3/8 КРУГА 26 мм 	2-0	3	45	Черный	36	Покрытие воском	SS-685