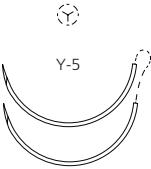
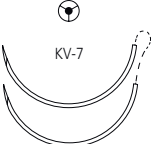
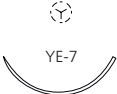


Ti-Cron™ / Surgidac™ Плетеный и монофиламентный нерассасывающийся покрытый и непокрытый шовный материал из полиэстера.

Описание материала:	Нерассасывающийся, стерильный шовный материал из полиэстера Ti-Cron™ / Surgidac™ изготавливается из полиэтилена тетрафталата. Шовный материал состоит из волокон полиэстера с высоким молекулярным весом, длинными линейными цепочками с ароматическими кольцами в качестве связующего звена. Плетеный шовный материал Ti-Cron™ выпускается как непокрытым, так и покрытым силиконом для увеличения скольжения поверхности, тем самым улучшая манипуляционные свойства, прохождение через ткани и опускание узла. Монофиламентные нити Surgidac™ не покрыты, а плетеные доступны в непокрытом варианте, а также покрытом полибутиленом адипатом.
Характеристика материала:	Шовный материал Ti-Cron™ / Surgidac™ обладает высокой прочностью узла и самой нити, тем самым обеспечивая: - максимальную надежность при сопоставлении тканей в трудных условиях - постоянную поддержку - максимальную надежность при использовании искусственных имплантов - метод плетения и силиконовое покрытие обеспечивают мягкое прохождение через ткани, поддерживая при этом оптимальную прочность узла.
Показания:	Шовный материал Ti-Cron™ / Surgidac™ из полиэстера предназначен для сопоставления тканей и /или для лигирования, используется в общей, торакальной, пластической, косметической, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и нейрохирургии.
Действие:	Шовный материал Ti-Cron™ / Surgidac™ из полиэстера вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
Прочность:	Нерассасывающийся шовный материал Ti-Cron™ / Surgidac™ не меняет прочности in vivo.
Стерилизация:	Шовный материал Ti-Cron™ / Surgidac™ размером 6-0 и менее или с прокладками стерилизуется этилен оксидом. Размер 5-0 и более стерилизуется путем гамма облучения.
Упаковка:	Плетеный шовный материал Ti-Cron™ возможен как в неокрашенном виде, так и окрашенном в синий D&C цвет No.6, покрытый или не покрытый, размерами от 5 (метрический размер 7) до 8-0 (метрический размер 0.4). Шовный материал Surgidac™ выпускается неокрашенный (белый) или окрашенный в зеленый D&C цвет No.6. Нити выпускаются плетеными, покрытыми и непокрытыми в размерах от 5 (7 метрик) до 8-0 (0.4 метрик) и монофиламентными от 9-0 (0.3 метрик) до 11-0 (0.1 метрик). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках различной длины и катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт. Шовный материал из полиэстера Ti-Cron™ выпускается со специальными PTFE (политетрафлуорэтиленовые) прокладками между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта. Прокладки могут иметь прямоугольную или овальную форму.

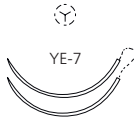
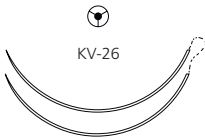
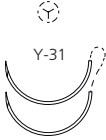
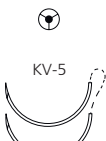
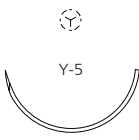
Ti-Cron™ / Surgidac™

Плетеный и монофиламентный нерассасывающийся покрытый и непокрытый шовный материал из полиэстера.

Колюще-режущая / Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 КРУГА 26 мм 	3-0	2	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886316741
	2-0	3	75	Белый	36	CARDIOPOINT™	8886285551
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™	8886322256
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x3 мм жесткие	8886320356
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886321356
	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886316751
	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886321251
	2-0	3	90	Белый	36	CARDIOPOINT™	8886281551
	2-0	3	90	Белый	36	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886284051
	2-0	3	10x90	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™	8886285256
	2-0	3	10x90	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886329056
	0	3.5	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886316761
1/2 КРУГА 26 мм 	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	SURGALLOY™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886324056
	2-0	3	90	Синий	36	SURGALLOY™	8886316851
	2-0	3	90	Синий	36	SURGALLOY™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886323951
1/2 КРУГА 27 мм 	1	4	75	Синий	36		8886311771
1/2 КРУГА 37 мм 	0	3.5	75	Синий	36		8886311961
1/2 КРУГА 40 мм 	0	3.5	75	Синий	36		8886309261
	1	4	75	Синий	36		8886309271
	2	5	5x75	Синий	12		8886314783
	5	7	5x75	Синий	12		8886314789
1/2 КРУГА 48 мм 	5	7	4x75	Синий	12		8886281889
3/8 КРУГА 18 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886310731

Ti-Cron™ / Surgidac™

Плетеный и монофиламентный нерассасывающийся покрытый и непокрытый шовный материал из полиэстера.

Колюще-режущая / Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 КРУГА 18 мм 	3-0	2	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886318241
	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886318251
	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886323351
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886336556
	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886263151
	2-0	3	10x90	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™	8886305256
	2-0	3	10x90	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886265856
3/8 КРУГА 26 мм 	2-0	3	10x90	Синий/белый	6	SURGALLOY™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886327556
1/2 КРУГА 16 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886316031
	3-0	2	75	Белый	36	CARDIOPOINT™	8886288041
	3-0	2	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886316041
	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886312551
	2-0	3	75	Белый	36	CARDIOPOINT™	8886288051
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™	8886287756
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886322156
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886321856
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886321956
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x6 мм овал/жесткие	VCD2031MFE
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x6 мм овал/мягкие	VCD2031MSE
	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886316051
	2-0	3	90	Синий		CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886320451
	2-0	3	90	Белый		CARDIOPOINT™ Прокладки 3x3 мм жесткие	8886281151
	2-0	3	90	Белый	36	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886280851
1/2 КРУГА 17 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™	8886315931
	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™	8886315941
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	SURGALLOY™	8886287956
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	SURGALLOY™ Прокладки 3x3 мм жесткие	8886323656
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	SURGALLOY™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886323556
	2-0	3	90	Синий	36	SURGALLOY™	8886315951
1/2 КРУГА 26 мм 	3-0	2	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886308841
	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886308851

Ti-Cron™ / Surgidac™

Плетеный и монофиламентный нерассасывающийся покрытый и непокрытый шовный материал из полиэстера.

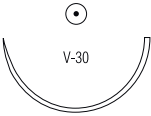
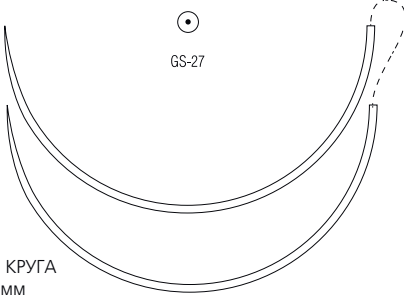
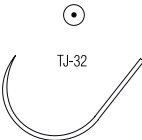
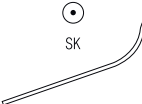
Колюще-режущая / Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 КРУГА 20 мм 	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886315751

Без игл / Non Needled							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
Лигатуры	5-0	1	12x45	Синий	36		8886300821
	4-0	1.5	12x75	Синий	24		8886300332
	3-0	2	12x45	Синий	36		8886300841
	3-0	2	12x75	Синий	24		8886300342
	2-0	3	12x45	Синий	36		8886300851
	2-0	3	12x75	Синий	24		8886300352
	0	3.5	6x45	Синий	24		8886300162
	0	3.5	6x75	Синий	24		8886300262
	1	4	6x45	Синий	24		8886300172
Катушки	3-0	2	250	Синий	24		8886338042
	2-0	3	250	Синий	24		8886338052
	0	3.5	250	Синий	24		8886338062
	1	4	250	Синий	24		8886338072
	2	5	250	Синий	24		8886338082
	4	6	150	Синий	24		8886338109
	5	7	150	Синий	24		8886338189

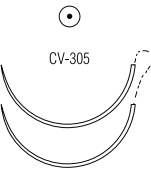
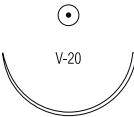
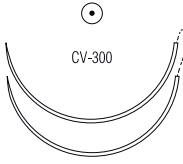
Прокладки							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
Прямоугольные прокладки из PTFE 					10x36	Прокладки 3x3 мм жесткие	8886867501
					10x36	Прокладки 3x7 мм жесткие	8886867701
					10x36	Прокладки 3x7 мм мягкие	8886868201
					5x36	Прокладки 9.5x4.8 мм жесткие	8886867901
					5x36	Прокладки 9.5x4.8 мм мягкие	8886867801
Овальные прокладки из PTFE 					10x36	Прокладки 3x6 мм жесткие	VCG36FE
					10x36	Прокладки 3x6 мм мягкие	VCG36SE

Ti-Cron™ / Surgidac™

Плетеный и монофиламентный нерассасывающийся покрытый и непокрытый шовный материал из полиэстера.

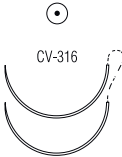
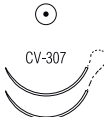
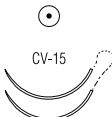
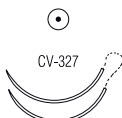
Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 КРУГА 30 мм 	3-0	2	75	Синий	36		8886320541
	2-0	3	75	Синий	36		8886320551
	0	3.5	75	Синий	36		8886320561
1/2 КРУГА 37 мм Н 	0	3.5	75	Синий	36		8886311361
	1	4	75	Синий	36		8886311371
	2	5	75	Синий	36		8886311381
	5	7	75	Синий	36		8886311179
1/2 КРУГА 40 мм Н 	2	5	75	Синий	36		8886337681
1/2 КРУГА 48 мм 	0	3.5	75	Синий	36		8886309761
	1	4	75	Синий	36		8886309771
 1/2 КРУГА 76 мм	0	3.5	75	Синий	36		8886319061
J-ИГЛА 32 мм 	1	4	75	Синий	36		8886310371
ЛЫЖА 23 мм 	2-0	3	120	Синий	36		8886301751
	0	3.5	120	Синий	36		8886301761
1/2 КРУГА 25 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	8886318531
	3-0	2	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	8886318541
	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	8886318551
	0	3.5	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	8886318561
	1	4	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	8886318571

Ti-Cron™ / Surgidac™ Плетеный и монофиламентный нерассасывающийся покрытый и непокрытый шовный материал из полиэстера.

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 КРУГА 25 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886325631
	3-0	2	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886325641
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3X6 мм овал/жесткие	VCD20305MFE
	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPOINT™ Прокладки 3X6 мм овал/жесткие	VCD20305FE
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™	8886335656
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886332456
	2-0	3	8x90	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3X6 мм овал/жесткие	VCD2036305FE
	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886325651
	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886333651
	2-0	3	90	Белый	36	CARDIOPOINT™	8886291451
	2-0	3	10x90	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™	8886298156
	2-0	3	6x90	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886330656
	0	3.5	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886325661
1/2 КРУГА 26 мм 	3-0	2	5x45	Синий	24	D-TACH™	8886325842
	0	3.5	120	Синий	36		8886301651
1/2 КРУГА 27 мм 	2-0	3	75	Синий	36		8886309351
	0	3.5	75	Синий	36		8886309361
1/2 КРУГА 27 мм Н 	2	5	5x45	Синий	24		8886337282
1/2 КРУГА 35 мм 	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886308251
	0	3.5	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886308261
1/2 КРУГА 35 мм 	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPOINT	8886327451
	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886339351
	0	3.5	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886327461
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Синий	36		8886309051
	0	3.5	75	Синий	36		8886309061
	1	4	75	Синий	36		8886309071

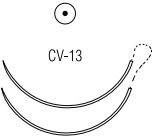
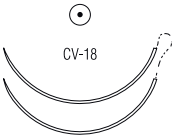
Ti-Cron™ / Surgidac™

Плетеный и монофиламентный нерассасывающийся покрытый и непокрытый шовный материал из полиэстера.

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 КРУГА 20 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886336931
	3-0	2	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886322741
	3-0	2	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886336941
	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886322751
	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPOINT™ Прокладки 3X6 мм овал/жесткие	VCD20316FE
	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886334851
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3X6 мм овал/жесткие	VCD20316MFE
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3X6 мм овал/мягкие	VCD20316MSE
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™	8886338556
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x3 мм жесткие	8886327756
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	8886332356
	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886336951
	2-0	3	90	Белый	36	CARDIOPOINT™	8886283951
1/2 КРУГА 22 мм 	0	3.5	5x45	Синий	24	D-TACH™	8886325762
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886328011
	5-0	1	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886328021
	5-0	1	75	Белый	36	CARDIOPOINT™	8886280121
	4-0	1.5	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886328031
	4-0	1.5	75	Синий	36	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x3мм жесткие	8886331431
	3-0	2	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886328041
3/8 КРУГА 16 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886322931
	3-0	2	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886322941
3/8 КРУГА 17 мм 	2-0	3	90	Синий	36	SURGALLOY™	8886264051
	2-0	3	10x90	Синий/белый	6	SURGALLOY™	8886263656
3/8 КРУГА 18 мм 	5-0	1	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886277521
	4-0	1.5	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886277531
	3-0	2	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	8886277541
1/2 КРУГА 20 мм 	3-0	2	5x45	Синий	24	D-TACH™	8886326742

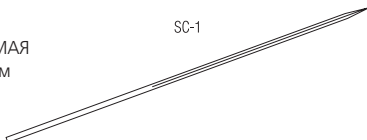
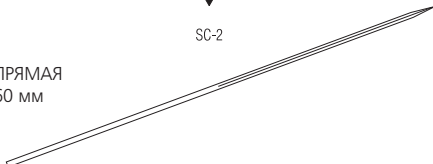
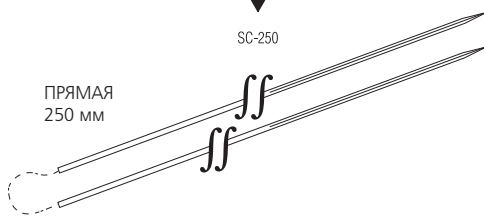
Ti-Cron™ / Surgidac™

Плетеный и монофиламентный нерассасывающийся покрытый и непокрытый шовный материал из полиэстера.

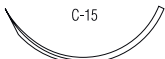
Колющая / Taper Point							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 КРУГА 10 мм		5-0	1	75	Синий	36	CARDIOPOINT™ 8886329821
		5-0	1	90	Синий	36	CARDIOPOINT™ 8886313921
		5-0	1	90	Синий	36	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x3 мм жесткие 8886329721
1/2 КРУГА 13 мм		5-0	1	60	Синий	36	CARDIOPOINT™ 8886322621
		4-0	1.5	60	Синий	36	CARDIOPOINT™ 8886322631
		4-0	1.5	90	Синий	36	CARDIOPOINT™ 8886324931
		3-0	2	45	Синий	36	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x3 мм жесткие 8886329541
1/2 КРУГА 16 мм		5-0	1	75	Синий	36	CARDIOPOINT™ 8886318621
		4-0	1.5	75	Синий	36	CARDIOPOINT™ 8886318631
		3-0	2	75	Синий	36	CARDIOPOINT™ 8886318641
		2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPOINT™ 8886318651
1/2 КРУГА 16 мм		5-0	1	90	Синий	36	CARDIOPOINT™ 8886327121
		4-0	1.5	75	Синий	36	CARDIOPOINT™ 8886308731
		4-0	1.5	90	Синий	36	CARDIOPOINT™ 8886327131
		3-0	2	75	Синий	36	CARDIOPOINT™ 8886308741
		3-0	2	10x75	Синий	6	CARDIOPOINT™ 8886308446
		3-0	2	90	Синий	36	CARDIOPOINT™ 8886327141
		2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPOINT™ 8886308751
		2-0	3	10x75	Синий	6	CARDIOPOINT™ 8886308456
		2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ 8886308356
		2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x3 мм жесткие 8886308656
		2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x6 мм овал/жесткие VCD20331FE 8886326956
		2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие 8886309156
		2-0	3	10x90	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие 8886326956
		2-0	3	10x90	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие 8886326956
3/8 КРУГА 22 мм		3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™ 8886262741
		2-0	3	90	Синий	36	SURGALLOY™ 8886262751
3/8 КРУГА 26 мм		2-0	3	10x90	Синий/белый	6	8886323056

Ti-Cron™ / Surgidac™

Плетеный и монофиламентный нерассасывающийся покрытый и непокрытый шовный материал из полиэстера.

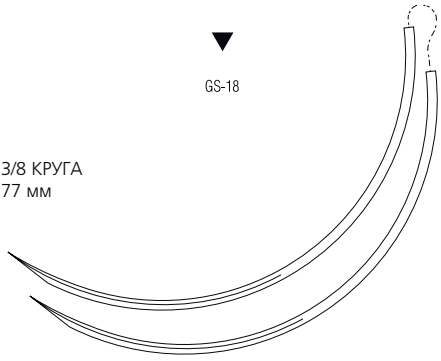
Обратно режущая / Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 КРУГА 37 мм Н 	1	4	75	Синий	36	8886302871
1/2 КРУГА 40 мм 	2	5	75	Синий	36	8886315581
1/2 КРУГА 40 мм Н 	1	4	75	Синий	36	8886302671
	2	5	75	Синий	36	8886302681
1/2 КРУГА 57 мм Н 	5	7	75	Синий	36	8886302779
ПРЯМАЯ 57 мм 	2-0	3	75	Синий	36	8886316351
	0	3.5	75	Синий	36	8886316361
	1	4	75	Синий	36	8886316371
ПРЯМАЯ 60 мм 	3-0	2	75	Синий	36	8886306241
	2-0	3	75	Синий	36	8886306251
	0	3.5	75	Синий	36	8886306261
ПРЯМАЯ 250 мм 	2-0	3	75	Синий	12	8886294753
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Синий	36	8886330951
	1	4	75	Синий	36	8886330971
	4	6	75	Синий	36	8886315409

Ti-Cron™ / Surgidac™ Плетеный и монофиламентный нерассасывающийся покрытый и непокрытый шовный материал из полиэстера.

Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 КРУГА 16 мм		4-0	1.5	45	Синий	36	8886304531
		4-0	1.5	75	Синий	36	8886304631
3/8 КРУГА 19 мм		4-0	1.5	45	Синий	36	8886304731
		3-0	2	45	Синий	36	8886304741
		3-0	2	75	Синий	36	8886305541
		2-0	3	75	Синий	36	8886304851
3/8 КРУГА 24 мм		3-0	2	75	Синий	36	8886305041
		2-0	3	75	Синий	36	8886305051
		2-0	3	90	Синий	36	8886306551
		0	3.5	75	Синий	36	8886305061
		0	3.5	90	Синий	36	8886306561
		2-0	3	75	Синий	36	8886307051
3/8 КРУГА 26 мм		3-0	2	75	Синий	36	8886302341
		2-0	3	75	Синий	36	8886302351
		0	3.5	75	Синий	36	8886302361
		0	3.5	90	Синий	36	8886301261
		1	4	75	Синий	36	8886302371
		2-0	3	75	Синий	36	8886305451
3/8 КРУГА 30 мм		0	3.5	75	Синий	36	8886305461
		1	4	75	Синий	36	8886305471
		2	5	75	Синий	36	8886305481
		5	7	45	Синий	12	8886305689
3/8 КРУГА 35 мм		0	3.5	75	Синий	36	8886339561
		1	4	75	Синий	36	8886339571
		2	5	75	Синий	36	8886339581
		GS-18					
1/2 КРУГА 26 мм H		0	3.5	75	Синий	36	8886339561
		1	4	75	Синий	36	8886339571
		2	5	75	Синий	36	8886339581

Ti-Cron™ / Surgidac™

Плетеный и монофиламентный нерассасывающийся покрытый и непокрытый шовный материал из полиэстера.

Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
 GS-18 3/8 КРУГА 77 мм		2	5	75	Синий	24	8886312882

Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting								
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 КРУГА 13 мм		5-0	1	45	Белый	12	SURGALLOY™	SCD-2864-G
		4-0	1.5	45	Белый	12	SURGALLOY™	8886286234
1/2 КРУГА 16 мм		2-0	3	45	Синий	12	SURGALLOY™	8886305953

Шпатель / Spatula							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/4 КРУГА 8 мм		6-0	0.7	45	Белый	12	CD-3113-K
		5-0	1	45	Белый	12	D-1764-K
		5-0	1	45	Белый	12	CD-3123-K
Кривизна 90° Длина иглы 7.18 мм Радиус 5.08 мм							